

RMK-900 Dimensión



RMK-900

Especificación técnica	
Rango de medición	
Distancia al vértice:	0,0 mm, 12,00 mm, 13,5 mm, 15,00 mm
Potencia esférica:	-30,00D~ +25,00D, (VD=12mm, distancia de paso:
Potencia cilíndrica:	0,12D/0,25D) 0,00D~12,00D (distancia de paso: 0,12D/0,25D)
Eje del cilindro:	0°~180° (Distancia de paso: 1°)
Símbolo del cilindro:	-, +, ±
Diámetro pupilar mínimo	2,0 mm
medible: Radio de curvatura	Impresora térmica con corte automático de papel, pantalla
corneal: Impresora:	LCD a color, 5,0 a 13,0 mm (distancia de paso: 0,02 mm),
Monitor:	100-240 V CA, 50/60 Hz.
Fuente de alimentación:	75 VA
Energía eléctrica:	500×290×510 mm
Dimensión:	2A 250V
Fusible:	



Supore

RMK-900

AUTOREFRACTOQUERATÓMETRO AVANZADO



Distribuidor por



**WORLD
VISION
COMPANY**

Cel. +57 320 256 9824
Calle 18 # 9-40, Oficina 201
Bogotá D.C
www.Worldvisioncompany.com.co



Supore

Empresa: Shanghai Supore Instruments Co., Ltd.
Dirección: No. 800 Yeji RD, Shanghai, China

Teléfono: 021-36162800-
882 Fax: 021-36162990

Correo electrónico:
sale99@supore.com www.supore.com

RMK-900

AUTOREFRACTOQUERATÓMETRO AVANZADO

- Incorpora la tecnología de reconocimiento facial Haar Like y Adaboost
- Impresora de corte automático integrada
- Facilita la identificación de autoservicio del cliente
- Equipado con diversos elementos de prueba como REF, KER, K&R
- Cambio automático entre el ojo izquierdo y derecho, así como la posición del ojo medición de monitoreo

Adopte la tecnología más avanzada de detección de frente de onda de Hartmann para llevar a cabo

La medición es más consistente y exacta.


- Incluye diversos modos de medición, como el modo automático dual, ojo, ojo singular automático y manual.

Optometría automatizada de autoservicio inteligente


El dispositivo de optometría inteligente RMK-900 se erige como el primer equipo de autooptometría inteligente en China. Emplea algoritmos de reconocimiento facial, como Haarlike y Adaboost, para calcular de manera rápida la distancia entre la pupila y el mentón, ajustar automáticamente la posición del soporte frontal y realizar un seguimiento en tiempo real de la posición de la pupila del ojo humano. Esto posibilita una autogestión integral y una detección inteligente. En el ámbito crucial de la cadena industrial, se clasifica entre los productos destinados a "completar espacios en blanco" y "rellenar paneles débiles".

Reconocimiento autónomo inteligente, evaluación de autoayuda

El RMK-900 identifica automáticamente al cliente y se ajusta al modo de medición.

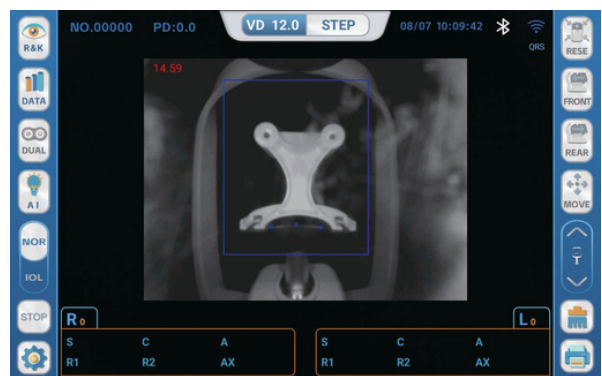

En el modo inteligente, se llevan a cabo la búsqueda ocular, el enfoque, la medición y el cambio entre el ojo izquierdo y el derecho.

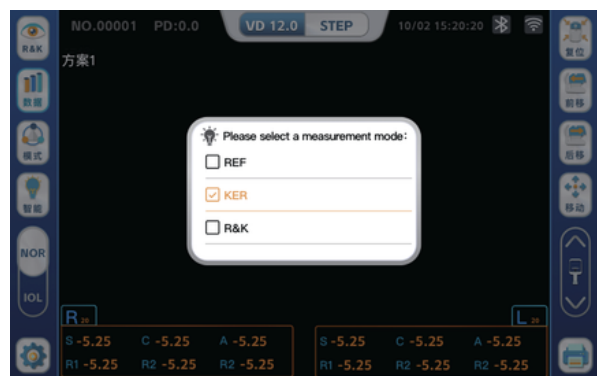

· Amplio modo de medición convencional, (Modo REF, KER) modo R&K.



Pantalla táctil LCD HD de 10,1". Operación ágil y cómoda sin necesidad de joystick.



Impresora automática de corte de papel integrada, más funcional. Modificar el papel.




Disfrute de la comodidad y precisión de nuestro modo inteligente, que localiza, enfoca, mide y alterna automáticamente entre el ojo izquierdo y el derecho. No es necesario.


Intervención manual o acción humana.



Interfaz de configuración intuitiva, con capacidad de actualización de software y restauración de fábrica.

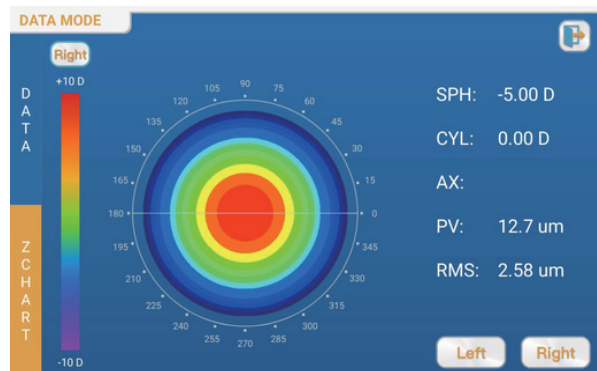

El modo Z-map puede emplearse para medir diversos resultados refractivos de una manera más vívida, lo que permite una mejor presentación al cliente.

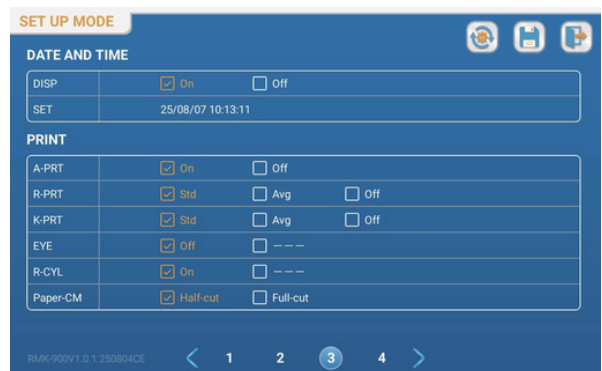

- Existen diversos parámetros de impresión disponibles.

DATA MODE										
DATA	KER			PD: 64.5			VD: 12.0			
	R	R1	R2	AX	R1	R2	AX	L		
0	7.95	7.95	8.03	8.03	0					
1	7.95	7.95	8.04	8.04	1					
2	7.95	7.95	8.03	8.03	2					
3					3					
4					4					
5					5					
6					6					
7					7					
8					8					
9					9					
AV	7.95	7.95	8.03	8.03	AV					

- Informe de salida de datos detallado